

# Aladin®

Dites **bonjour** à votre nouvelle lampe magique connectée



Prolonge l'autonomie

 Domalys  
créateurs d'autonomie


“ Prêt(e) à faire connaissance ?  
C'est parti ! ”

## Aladin éclaire et sécurise les déplacements de nuit...



Grâce à ses détecteurs de mouvements intégrés, **Aladin éclaire avec une lumière progressive** votre chemin pour faciliter vos déplacements la nuit.

Pour un maximum d'efficacité, nous conseillons de le fixer au mur :  
- soit dans votre chambre (parallèle ou face au lit)  
- soit dans le couloir qui mène à vos toilettes (ou dans la salle de bain)

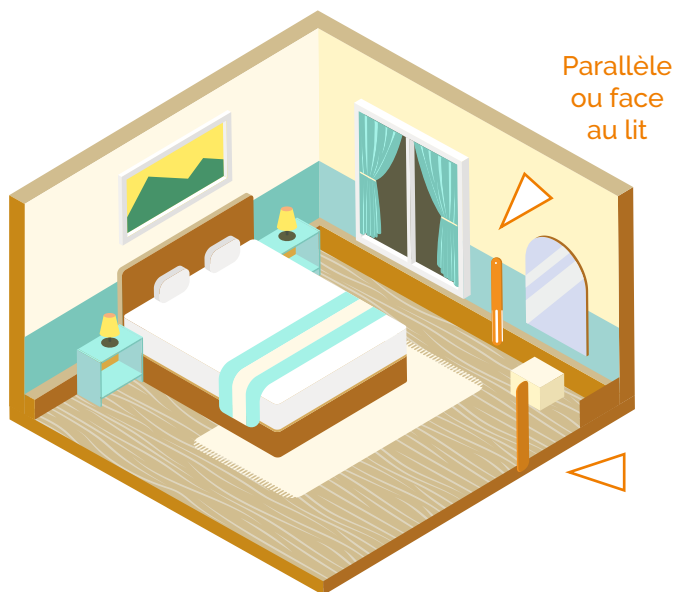

## ... et alerte un cercle de solidarité en cas de chute


Famille, proches, amis, voisins ou téléassistance (en option, voir page 6) sont alertés directement sur leurs téléphones pour une prise en charge rapide qui va minimiser les conséquences de la chute.



Les alertes seront envoyées « en cascade » sur les téléphones de 3 aidants (famille, voisin, ami(e)...) »

Les aidants, désignés par ordre de priorité, sont alertés « en cascade », les uns après les autres.

Exemple :

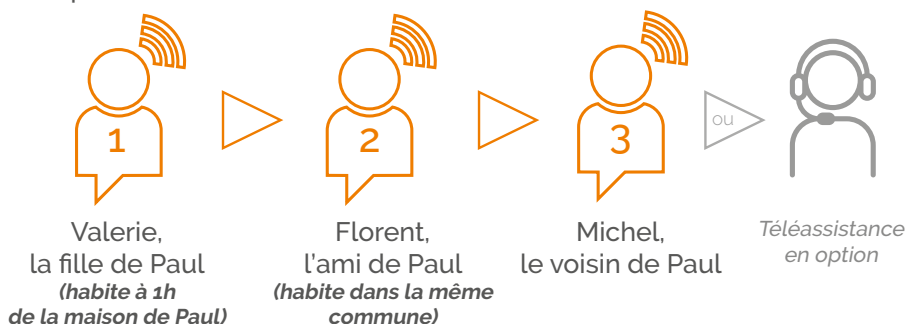


Configurez la liste des aidants à l'aide de :

- votre ordinateur : <http://online.domalys.com>
- votre tablette ou téléphone : **Aladin by Domalys** (IOS et Android)

## Des fonctions en plus avec le pack de 3 Aladin : découvrez le système PrediCare Technology® ...

L'installation simultanée de 3 Aladin va permettre d'analyser les habitudes de vie et donc de détecter les changements importants : qualité de sommeil en baisse, variation de température, activité nocturne en hausse, ...

Systeme PrediCare Technology®  
disponible avec un pack  
de 3 Aladin

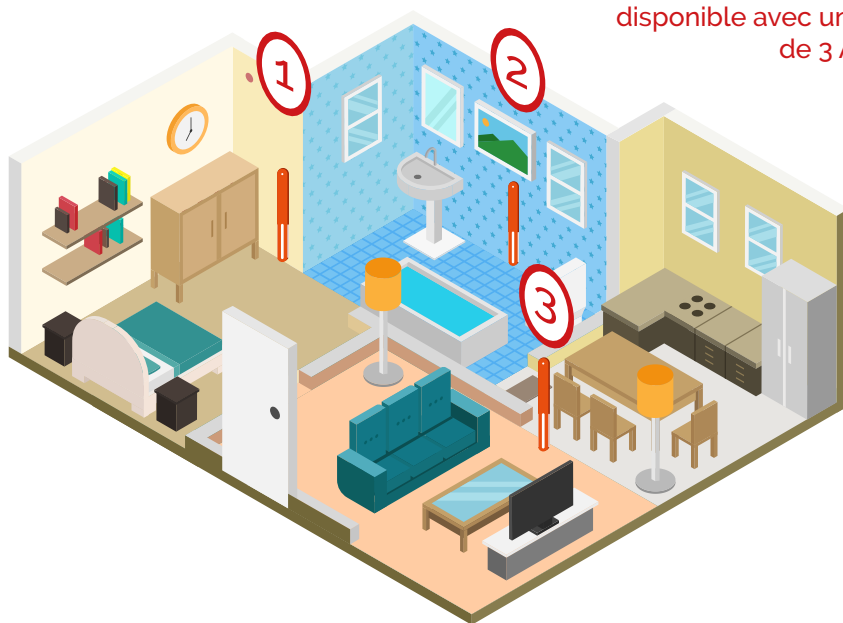

Idéalement, nous conseillons d'installer :

- un Aladin dans  **votre chambre** ①
- un  **dans le couloir qui mène aux toilettes** (ou à la salle de bain) ②
- et un dans  **une pièce de vie** principale (salon ou cuisine) ③

Pour signaler ces changements, des notifications **sont envoyées sur les téléphones des aidants.**

## ... et une fonction alarme

Grâce à ses capteurs de mouvement, Aladin vous informe en temps réel de l'activité au sein de votre domicile.

Vous recevez donc différents types de notifications :

- Alerte **chute**
- Signalement de **présence non justifiée\***
- Notifications **PrediCare®**



Credit photo : Adobe Stock  
\*Aladin ne se substitue pas un système d'alarme anti-intrusion avec télésurveillance.

## Anticiper avec Aladin permet de prolonger l'autonomie à domicile



Sur votre ordinateur ou votre téléphone, vous accédez à l'ensemble des données de suivi PrediCare technology® : température du domicile, nombre de chutes, temps de repos, qualité du sommeil ...

**En améliorant la qualité de suivi au quotidien, vous prolongez le temps passé et le bien-être à domicile.**

# Choisir une téléassistance

Vous êtes aidant et vous avez besoin de compter sur quelqu'un car vous habitez loin ou vous partez simplement en vacances ?

Aladin vous propose l'option téléassistance avec notre partenaire Filien ADMR.

## Filien ADMR, la téléassistance avec centre d'écoute certifié

Les solutions proposées sont modulables et évolutives pour assurer à nos aînés une assistance 24h/24 ou 7j/7. Aladin vous met automatiquement en relation avec le service d'écoute Filien ADMR qui alertera les secours si besoin.

**Option à activer sur : <http://online.domalys.com>**



## Vous bénéficiez, en plus d'Aladin d'une assistance à domicile 24h/24.



# Options et accessoires Aladin

## ■ Coques et façades personnalisables



Ardoise

Beige

Blanc


Argile

Bleuet

Anthracite

Bordeaux

## ■ Tablette avec chargeur téléphone ■ Support sol

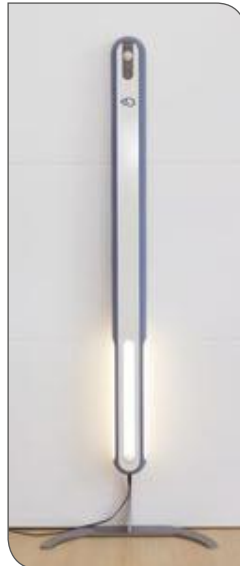

*Vous ne pouvez pas fixer Aladin au mur ?  
Il est possible de l'installer sur un support.*

# Installation simplifiée


1) Branchez le **bridge** sur votre box internet à l'aide du câble ethernet fourni (si vous avez souscrit à l'option clé 3G, branchez simplement la clé dans l'emplacement USB).

Box internet ↓



2) Branchez les Aladin dans les **prises électriques**

3) Les voyants des Aladin clignotent d'abord en orange avant de passer **au vert**.  
Tout est ok, vos Aladin sont opérationnels.

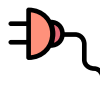

## Notice de montage disponible en ligne

[www.aladin.io](http://www.aladin.io)



### Domalys

Domalys • 58 Rue du Vercors, 86240 Fontaine-Le-Comte • Tél. : +33(0)5 49 83 00 08 • Fax : +33(0)5 49 84 50 42 • [contact@domalys.com](mailto:contact@domalys.com)

  [www.domalys.com](http://www.domalys.com)

*Aladin by Domalys fournit des informations. ce n'est pas un produit de santé. il ne se substitue pas à une consultation médicale.*